


Indikation: Primäre Rhizarthrose


## Vorteile

- ✓ Modulare Prothese in 4 Einzelteilen für eine perfekte Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten:
- ✓ Separate Pfanne und Inlay ermöglichen die Implantierung der Pfanne, ohne das Inlay zu beschädigen und den Tausch des Inlays, ohne die Pfanne zu entfernen.
- ✓ Sichere Platzierung und Sitz der Pfanne durch Doppelkonusausführung mit abgeflachtem Pol und Press-Fit-Verankerung.
- ✓ Anatomische Position des 1. Mittelhandknochens durch gebogenen Implantathals mit der Möglichkeit zur Einstellung der Daumenrotation in drei verschiedenen Positionen.
- ✓ HAP-beschichteter Schaft für zementfreie Implantation bei optimaler Belastungsverteilung und hoher Primärstabilität.

## Press-Fit-System

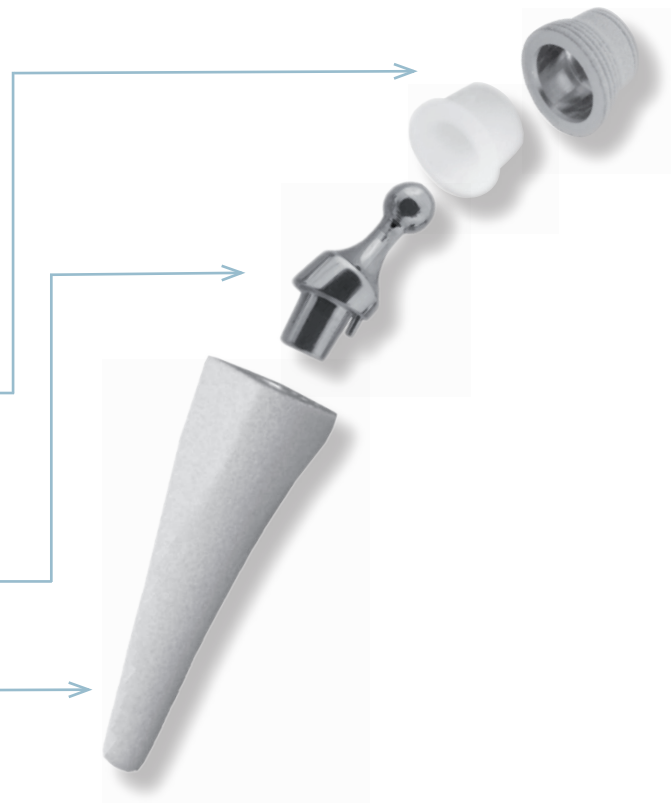

## 4 Schaftgrößen

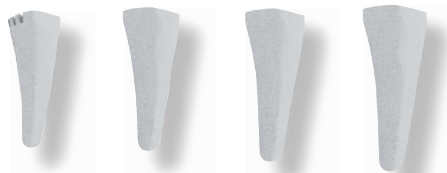

Artikel-Nr.: Gr. 1 WMT1    Gr. 2 WMT2    Gr. 3 WMT3    Gr. 4 WMT4

## 3 Halslängen



Artikel-Nr.: Kurz WMEC    Mittel WMEM    Lang WMEL

## Instrumentarium



## 3 Pfannengrößen (mit Inlay)



Durchmesser: 9 mm    10 mm    11 mm  
Artikel-Nr.: WMC109    WMC110    WMC111



MEMOMETAL DEUTSCHLAND GmbH  
Robert-Perthel-Str. 49  
50739 Köln - DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)221 379 537-0  
Fax: +49 (0)221 379 537-13  
info-germany@memometal.com  
www.memometal.com  
Patentiertes Implantat



# IVORY®

MODULARES,  
ZEMENTFREIES  
SYSTEM



*Bis heute mehr als 2500 Implantationen*

***Zur Wiederherstellung  
der Kraft und  
Schmerzreduzierung***

